

Soni M4 Brush

Инструкция по эксплуатации



Содержание

Правила техники безопасности	2
Описание устройства.....	4
Комплектация	5
Процесс эксплуатации	5
Количество вибраций	6
Рекомендации по применению	7
Зарядка	8
Техническое обслуживание	8
Чистка и уход.....	9
Утилизация.....	10
Обнаружение неисправностей	11
Технические характеристики.....	12
Гарантийные обязательства	13

Благодарим Вас за приобретение электрической зубной щетки Stoewer SoniBrush M4.

Мы рады, что Вы выбрали наш продукт и уверены, что он станет незаменим помощником для поддержания Вашего здоровья.

С уважением,
команда Stoewer



Правила техники безопасности

Детально ознакомьтесь с содержанием руководства по эксплуатации — следуйте всем указаниям.

! Перед использованием данной щетки обязательно проконсультируйтесь с Вашим стоматологом.

Электрическая зубная щетка Stoewer (далее устройство) произведена в соответствии с техническими стандартами и предназначена для ухода и очистки полости рта.

1. При первом использовании устройства у некоторых людей могут возникнуть некоторые неприятные ощущения (такие как раздражение и онемение). Не беспокойтесь, это нормальная ситуация, данные ощущения пройдут.

2. Не разбирайте, не ремонтируйте и не вносите модификации в конструкцию устройства.

3. Избегайте ударов и падений устройства. В случае обнаружения повреждений или неисправностей, не используйте устройство.

4. Перед подключением к источнику питания проверьте, соответствует ли напряжение домашней сети напряжению, указанному на устройстве.

5. Если в течение последних трех месяцев Вы переносили хирургическое вмешательство в области рта или пародонта, или если десны кровоточат более двух недель после использования устройства, обратитесь за консультацией к Вашему стоматологу перед использованием.

6. Это устройство предназначено только для чистки зубов, десен и языка, пожалуйста, не используйте его для других целей.

7. Не рекомендуется использовать данное устройство лицам, не знакомым с руководством по эксплуатации, лицам, находящимся под воздействием лекарств и алкоголя, а также детям и людям с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность.

8. Не используйте зарядную станцию на открытом воздухе или в условиях повышенной температуры и избегайте попадания влаги или других жидкостей в ее корпус.

9. Отключайте питание, когда Вы не используете зарядную станцию или каждый раз, когда Вы ее чистите. Следите за чистотой USB-разъема, чтобы предотвратить скопление пыли и грязи, в противном случае это снизит эффективность зарядной станции.

10. Не очищайте это устройство средствами для ухода за волосами, дезинфицирующими средствами для рук или кислотными очистителями, иначе это повредит корпус устройства.

11. Храните устройство в недоступном для детей месте.


12. Во избежание поломок не рекомендуется использовать устройство во время принятия душа и погружать его в жидкость.

13. Перед использованием данного устройства, если у Вас имеется кардиостимулятор или другие подобные медицинские приспособления, обязательно проконсультируйтесь с Вашим врачом.

14. Не касайтесь зарядной станции мокрыми руками и не погружайте ее в жидкость.

! Не используйте устройство, если у Вас имеются противопоказания.

Описание устройства

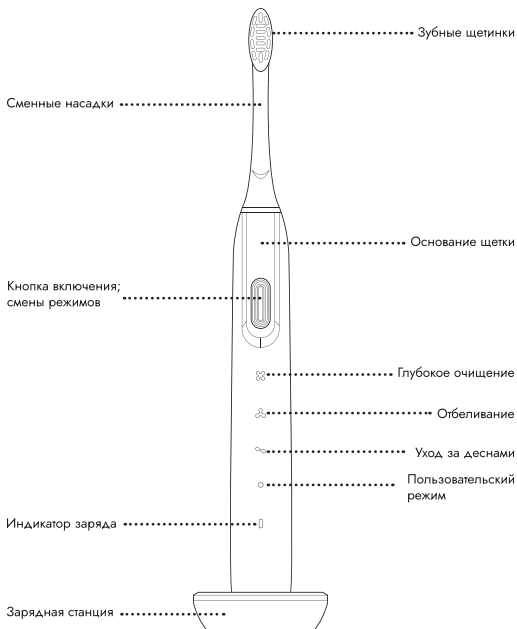

Комплектация

1. Электрическая щетка SoniBrush M4 — 1 шт;
2. Сменные насадки — 2 шт;
3. Зарядная станция — 1 шт;
4. Чехол для переноски — 1 шт;
5. Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном — 1 шт.

Процесс эксплуатации

Включение устройства

Установите насадку на рукоятку таким образом, чтобы направление щетины соответствовало передней части корпуса.

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку включения/смены режимов устройства. Режим очистки «Глубокое очищение» включен по умолчанию при первом использовании.

Переключение режимов

Чтобы поменять режим работы устройства, необходимо однократно нажать на кнопку включения/смены режимов. На корпусе загорится индикатор выбранного режима работы.

Пользовательский режим

Позволяет подстраивать интенсивность вибраций под Вашу полость рта. Для регулировки интенсивности перейдите в пользовательский режим. Удерживайте кнопку включения/смены режимов, чтобы подобрать подходящую интенсивность вибраций.

Отпустите кнопку после выбора интенсивности.

Функция памяти

Устройство автоматически сохраняет последний использованный режим после 5 секунд бездействия. При следующем включении оно будет автоматически запускаться в этом сохраненном режиме по умолчанию.

Количество вибраций

Устройство имеет 4 режима работы, каждый из которых характеризуется определенной интенсивностью вибрации.

Глубокое очищение — 35000 вибраций/мин.

Отбеливание — 38000 вибраций/мин.


Уход за деснами — 35000 - 38000 вибраций/мин.

Пользовательский режим — 3800 - 38000 вибраций/мин.

Рекомендации по применению

Рекомендуем использовать устройство в течение 2 минут каждый день.

Не прилагайте излишнего давления, чтобы не повредить поверхность зубов и десен. Двигайте чистящую головку медленно, выполняя вращательные движения.

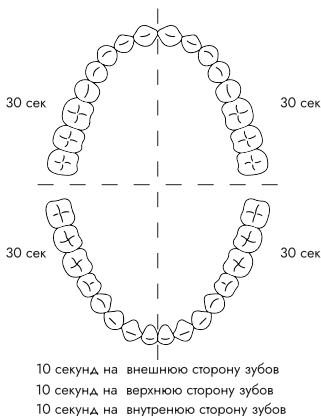

Короткая пауза каждые 30 секунд служит напоминанием о необходимости смены участка чистки полости рта для достижения оптимальных результатов.

Зарядка

Когда заряд батареи опустится ниже 10%, красный светодиод на корпусе устройства начнет мигать, напоминая о необходимости подзарядки.

Для зарядки устройства просто поместите его на зарядную станцию.

В процессе зарядки на корпусе будет мигать зеленый светодиод, сигнализируя о текущем процессе зарядки.

Полный цикл зарядки устройства занимает примерно 18 часов.

Устройство автоматически перестанет функционировать при размещении на зарядной станции во время процесса зарядки.

При загорании красного индикатора заряда батареи, зарядите устройство как можно скорее, чтобы избежать повреждения батареи и продлить срок его службы.

! Во время зарядки убедитесь, что устройство находится в месте, недоступном для детей.

Техническое обслуживание

- Заряжайте устройство каждые три месяца, даже если Вы им не пользуетесь.
- Не заряжайте устройство с помощью не оригинального зарядного устройства, это может привести к возгоранию.
- Меняйте насадки не реже одного раза в 2-3 месяца.
- Проводите очистку и уход за устройством на основании пункта «Чистка и уход».

Чистка и уход

Рукоятка

Протрите рукоятку, чтобы удалить загрязнения после чистки, а затем высушите ее мягкой тканью.

Во избежание повреждений, не погружайте устройство в воду на длительное время. Не чистите устройство агрессивным моющим средством.

Зарядная станция

Протрите ее мягкой влажной тканью и дайте ей высохнуть естественным путем. Пожалуйста, не допускайте попадания влаги и не погружайте ее в воду.

Сменные насадки

После использования промойте сменную насадку устройства под проточной водой и дайте ей высохнуть.

Не выдергивайте и не дергайте щетинки на сменной насадке, иначе они потеряют форму.

Рекомендуется заменять насадку устройства в течение 2-3 месяцев после использования.

Совместное использование одной насадки противоречит правилам гигиены и не рекомендуется.

Утилизация



Устройства, отмеченные данным символом, не могут быть выброшены вместе с обычными бытовыми отходами и должны быть доставлены в пункт сбора отходов для утилизации электрических и электронных устройств. Если Вы хотите утилизировать упаковку, убедитесь, что Вы соблюдаете экологические нормы, действующие в Вашей стране.



Данный товар является сложнотехническим устройством.



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники" ТР ЕАЭС 037/2016.

Обнаружение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решение
Слабая вибрация	1. Вы слишком сильно давите на зубы. 2. Низкий заряд батареи.	1. Уменьшите давление щетки на зубы. 2. Проверьте заряд батареи и зарядите устройство.
Устройство быстро выключается во время работы	1. Проблема в зарядной станции. 2. Низкий уровень заряда батареи.	1. Убедитесь, что устройство правильно установлено на зарядной станции. 2. Зарядите устройство до 100%.
Устройство не работает	Проверьте корректность способа зарядки и убедитесь, что устройство заряжено до конца.	1. Зарядите устройство до 100%. 2. Обратитесь к Вашему дистрибьютору для замены или ремонта устройства

! Если вышеуказанные методы не помогли устранить проблему, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр или к квалифицированному специалисту. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Технические характеристики

Бренд	STOEWER
Модель	SoniBrush M4
Максимальное число вибраций в минуту	38000
Жесткость щетины	средняя
Габариты, мм	30 x 30 x 250
Габариты коробки, мм	94 x 52 x 334
Напряжение зарядной станции	5 В
Мощность зарядной станции	2 Вт
Напряжение электр. зубной щетки	3,7 В
Мощность электр. зубной щетки	2 Вт
Степень влагозащиты	IPX 7

Manufacturer: Shenzhen Photondust Technology Co., Ltd

Address: 2106, 21st Floor, Block A, Huide International Plaza, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Производитель: Шэньчжэнь Фотондаст Технолоджи Ко., Лтд

Адрес: 2106, 21-й Этаж, Блок А, Хуэйдэ Интернэшнл Плаза, Фуюн, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай

Уполномоченный импортер: ООО «ТСВ»

Адрес уполномоченного импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старо-заводская, д. 13Д

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Во избежание проблем и недоразумений просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в инструкции по эксплуатации!

1. Настоящая гарантия предусматривает устранение выявленных дефектов устройства, возникших по причине его некачественного производства или производственного брака, путем ремонта или замены устройства или дефектных частей (по выбору организации, предоставляющей гарантийные обязательства).

2. Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- четко, правильно и полностью заполнена информация об устройстве в гарантийном талоне;
- серийный номер устройства не изменен, не удален, не стерт и читается разборчиво.

3. Гарантия аннулируется в случаях:

- нарушений требований данной инструкции по эксплуатации;
- присутствия следов механических повреждений;
- внесения изменений в конструкцию или комплектацию;
- использования не по прямому назначению;
- наличия следов вскрытия корпуса устройства для самостоятельного ремонта;
- действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, в т.ч. пожара, неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на устройство (дождь, снег, влажность,

нагрев, охлаждение, агрессивные среды), а также бытовых и других факторов, не зависящих от действий изготовителя и не связанных с технической неисправностью устройства.

4. Гарантия определяется серийным номером устройства.

5. Гарантийный срок на STOEWER SoniBrush M4 составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи первому покупателю.

6. Ответственность за какой-либо ущерб, причиненный покупателю и/или третьим лицам, возникший в результате несоблюдения правил, изложенных в инструкции по эксплуатации устройства, несет покупатель.

7. Срок службы устройства составляет 5 (пять) лет с учетом проведения регулярного сервисного обслуживания и соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями инструкции.

8. Отслуживший назначенный срок службы устройство, вывозится на промышленные полигоны твердых бытовых отходов по согласованию с органами Роспотребнадзора в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке.

STÖEWE

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА


STÖEWE

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
остается у покупателя

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
изымается при обслуживании

Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи
Название организации	Дата приема в ремонт
.....	Дефект
.....	
.....	Ф.И.О. покупателя
Место для печати	
	Адрес покупателя
	
	Телефон покупателя
	Дата ремонта
	Подпись мастера

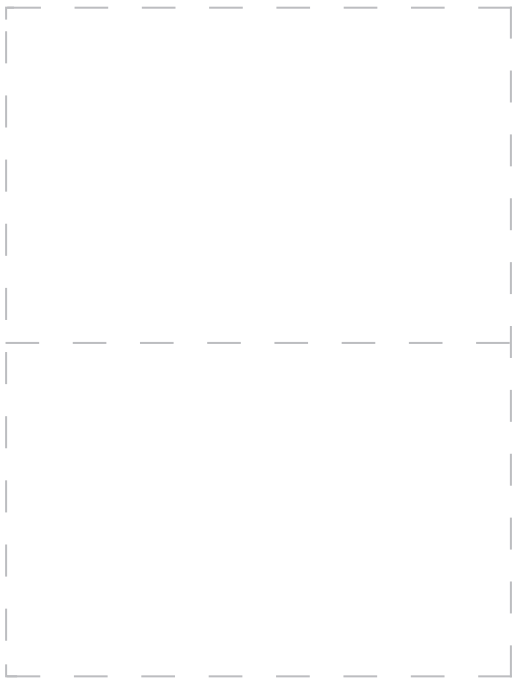



Забота о клиентах

Если у Вас возникли какие-либо проблемы или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами!

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти в чат с нашей службой поддержки. Оставьте заявку по телефону и мы оперативно решим Вашу проблему! **+7 (800) 350 22 87**
Ежедневно с 9 до 20 по МСК.



Гарантия

Заполните форму
на нашем сайте и получите

+1 год к гарантии

<https://stoewer.ru/garantiya-1-god/>